

SK1 介護保険適用

実用新案登録済



スワン SK1
*マットレス、ベッドパッドタイプ
TAISコード00714-000003
寸法：幅83×191×4cm
体圧分散効果の高い天然ゴムを使用。マットレスの上に直接敷いてご使用下さい。敷布団の代わりにしてご使用いただけます。

SK2 介護保険適用



スワン SK2
*車椅子クッション
TAISコード00714-000004
寸法：幅40×40×6cm
内部の二層構造が体圧分散効果を高め、座位を保持します。

SK3 介護保険適用



スワン SK3
*車椅子クッション
TAISコード00714-000005
寸法：幅40×40×4cm
座位を保持し、体圧を分散します。

SK4 介護保険適用

実用新案登録済



スワン SK4
*車椅子クッション
TAISコード00714-000006
寸法：幅40×83×4cm
背中からお尻までの一体型クッション。床ずれ予防として、必要な部分に敷いてご使用いただけます。

SK6 介護保険適用



スワン SK6
*マットレス
TAISコード00714-000009
寸法：①幅83×192×4cm
②幅91×192×4cm
2分割のため部分当てにご使用いただけます。また持ち運びが容易です。

SK7 介護保険適用



スワン SK7
*車椅子クッション
TAISコード00714-000008
寸法：幅40×40×8cm
中央の十字の溝が背骨、尾骨の部分の当りを緩和します。

SK8 介護保険適用

実用新案登録済



スワン SK8
*車椅子用クッション
TAISコード00714-000010
寸法：幅40×40×4cm(カバー装着時)
座面を2分割する事によりサイドコーナーに使用でき車椅子収納時、コンパクトに収まります。

M1 介護保険適用



スワン M1
*クッション、円柱型
TAISコード00714-000014
寸法：①幅14×83cm
②幅12×40cm
背中やかかと、ひざ下等に当ててご使用下さい。

M2 介護保険適用



写真は①です。

スワン M2
*クッション、枕型
TAISコード00714-000015
寸法：①幅40×20×8cm
②幅50×30×8cm
頭部の圧力を分散。体位変換用にもご利用いただけます。

M3 介護保険適用



写真は①です。

スワン M3
*クッション、三角型
TAISコード00714-000007
寸法：幅40×20×10cm
体位変換クッション(床ずれ防止用)にもご利用いただけます。患者の方も気持ち良く感じます。

床ずれ防止
スワン安心マットレス
感染 床ずれ予防 両面使用のソフトとハード《硬さが違う》二層構造

- 日本国特許済
- 国際特許出願済
- 10年以上使用出来ます




おばあちゃん
介護が楽になったね

よかったね

介護が楽になったね! 2011年10月新版
天然素材が優しい寝心地をお約束します。

発売元：
株式会社 富士サポート
本社：〒997-0033 山形県鶴岡市泉町7-59
TEL,0235-22-6678 FAX,0235-22-3788
工場：〒997-0043 山形県鶴岡市東新斎町2-50
TEL,0235-29-4051 FAX,0235-29-4052

取扱代理店

 **株式会社 富士サポート**

スワン®安心マットレスはエアーマットレスにも劣らないほどの体圧分散です。

特徴

感染床ずれ防止

スワン®安心マットレス

天然ゴムの優れた特性

- 天然ゴムマットレスは他のマットレスに使用されている合成品に比べ、耐久性に優れ、無害で環境に優しい素材です。
- どのような姿勢でも身体を優しくサポートし、体圧を分散します。
- 使用者の体重をゴムの反発力で体圧分散することにより、血液循環を妨げません。

スワン®安心マットレスの特徴

- 『ソフト』と『ハード』の2層構造になっており、用途に応じて両面ご使用いただけます。マット2枚分の効果があります。

- 表面は防水性、透湿性、抗菌性のある特殊フィルムで完全被覆してあります。

- 失禁等で汚染されても内部に浸透する事なく、清拭行為により清潔さを保持します。(水洗いが可能です)

*天然素材繊維につき、サイズ・重量等に関しましては製造過程において多少の差異が生じることがあります。

*商品の意匠、仕様において改善のため予告なく変更することがあります。

*諸事情の変動により、やむを得ず価格を変更することがあります。

病院・介護施設の新築・増築または導入時にSR10・SR8・SO7をご利用ください。

スワン®安心マットレスに入れ替えられた病院及び施設様の中には、利用者様が穏やかな表情になられたとの声が寄せられています。

スワン®SR10・SR8(ソフト・ハード)のH構造の仕組み

安心

特殊抗菌・殺菌性のあるフィルム完全被覆加工
ソフト層天然ゴム素材
ハード層天然ゴム素材

空気穴層
ソフト・ハード合計空気穴数
・幅83cm(5200個)以上
・幅91cm(5600個)以上
優しく体をいたわります。

※『H型構造』により、体圧が放射状に分散されるためマットの反発力も自然。

加重 加重
反発 反発

スワン®安心マットレス実物の構造写真
上下・ソフト・ハード
空気穴数5000個以上

※写真は実物です。

日本国特許済

体圧分散測定結果 → 身体にやさしさを与えてくれます。

■スワン®安心マットレスSR10体圧分散測定結果

■ニッタ製体圧分布測定装置BIG-MAT VIRTUALにて計測 測定者条件…被験者(身長173cm・体重65kg)

安心

スワン®安心マットレスは、殆ど青で体圧分散状態は非常によい結果です。安心してご使用出来ます。

●スワン®ソフト使用測定結果




●スワン®ハード使用測定結果



一般普及型マットレス

●体圧分散が充分でない画像(参考資料)

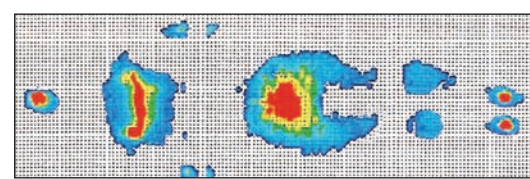

黄・赤の箇所は床ずれを発生する危険な部分です。

mmHg

SR10

介護保険適用

SR8

介護保険適用



表裏ソフト・ハード二層構造(H構造) 床ずれ防止


●スワン®SR10
TAISコード 00714-000001
寸法：幅83×191×10cm
幅91×191×10cm (表：ソフト 裏：ハード)

●スワン®SR8
TAISコード 00714-000012
寸法：幅83×191×8cm
幅91×191×8cm (表：ソフト 裏：ハード)

- 病院・介護施設などに最適。
- ご家庭で介護を受けている方、是非どうぞ。
- 一般ご家庭で元気な方も快適にご使用いただけます。
- 表面のフィルムは抗菌力があり安心です。

SO7

介護保険適用

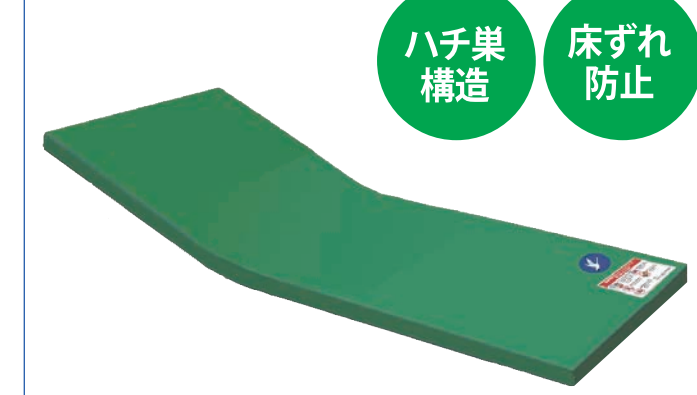


ハチ巣構造 床ずれ防止

●スワン®SO7
TAISコード 00714-000002
寸法：幅83×191×7cm
幅91×191×7cm

- 病院・介護施設などに最適。
- ご家庭で介護を受けている方、是非どうぞ。
- 一般ご家庭で元気な方も快適にご使用いただけます。
- 表面のフィルムは抗菌力があり安心です。

安心フィルム品質試験結果

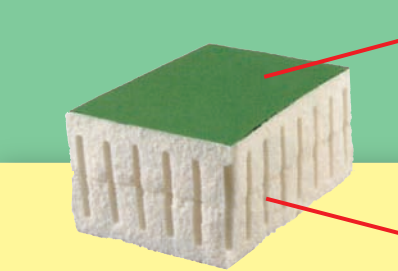

安心スポンジ品質試験結果

〈試験番号11207232(1/2)〉
[試験菌株]黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus NBRC 12732 ※2011年6月17日検査済

試料名	抗菌活性値
①フィルム	4.8

〈試験番号11207232(2/2)〉
[試験菌株]大腸菌 Escherichia coli NBRC 3972

試料名	抗菌活性値
①フィルム	2.3

〈試験番号11207377(1/3)〉
[試験菌株]黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus NBRC 12732

試料名	生菌数の常用対数値	殺菌活性値	静菌活性値
①スポンジ	接種直後	4.3	2.3
	18時間後	2.1	

〈試験番号11207377(2/3)〉
[試験菌株]肺炎桿菌 Klebsiella pneumoniae NBRC 13277

試料名	生菌数の常用対数値	殺菌活性値	静菌活性値
①スポンジ	接種直後	4.1	3.1以上
	18時間後	1.3以下	

〈試験番号11207377(3/3)〉
[試験菌株]MRSA Methicillin resistant Staphylococcus aureus IID 1677

試料名	生菌数の常用対数値	殺菌活性値	静菌活性値
①スポンジ	接種直後	4.3	3.0以上
	18時間後	1.3以下	

